

**Telefonwählgerät ProfiCaller**

Das Telefonwählgerät **ProfiCaller** ruft bei einer Störung selbständig bis zu 4 Telefonnummern an und gibt einen vorher eingegebenen Text wieder. Die Anwahlreihenfolge ist frei wählbar. Es werden automatisch 3 Wahlwiederholungen je Rufnummer durchgeführt. Der Ansagetext ist max. 40 Sekunden lang. Mit Steckernetzteil.  
Im Standard sind alle 4 Alarmausgängen vorkonfiguriert (5 m Anschlußleitung).



ProfiCaller

Außenmaße (BxTxH)	mm : 150x30x104
Netzanschluß	Volt / Hz / Ph : 230/50/1 mit Steckernetzteil 11,5V bis 14V
Nebenstellentauglich	: Ja
Systemvoraussetzungen	: Telefonanschluß (TAE -N-); potentialfreier Kontakt am Kühl- oder Tiefkühlgerät oder ProfiTec Temperaturüberwachungs und Protokollsystem (siehe separaten Prospekt)

**ProfiCaller + Zubehör**

**Art.-Nr.**

ProfiCaller	ZXX2-009-TX
Unterbrecherfreie Spannungsversorgung (USV).	ZXX2-007-20


**Anschlußvarianten:**

Für bis zu 4 Kühl- und Tiefkühlgeräte **mit** potentialfreiem Kontakt.

- ① Telefonischer Alarm durch ProfiCaller.

Für bis zu 4 Kühl- und Tiefkühlgeräte **ohne** potentialfreien Kontakt.

- ② Akustischer und optischer Alarm durch ProfiTec (siehe separaten Prospekt).
- ③ Telefonischer Alarm durch ProfiCaller via ProfiTec.

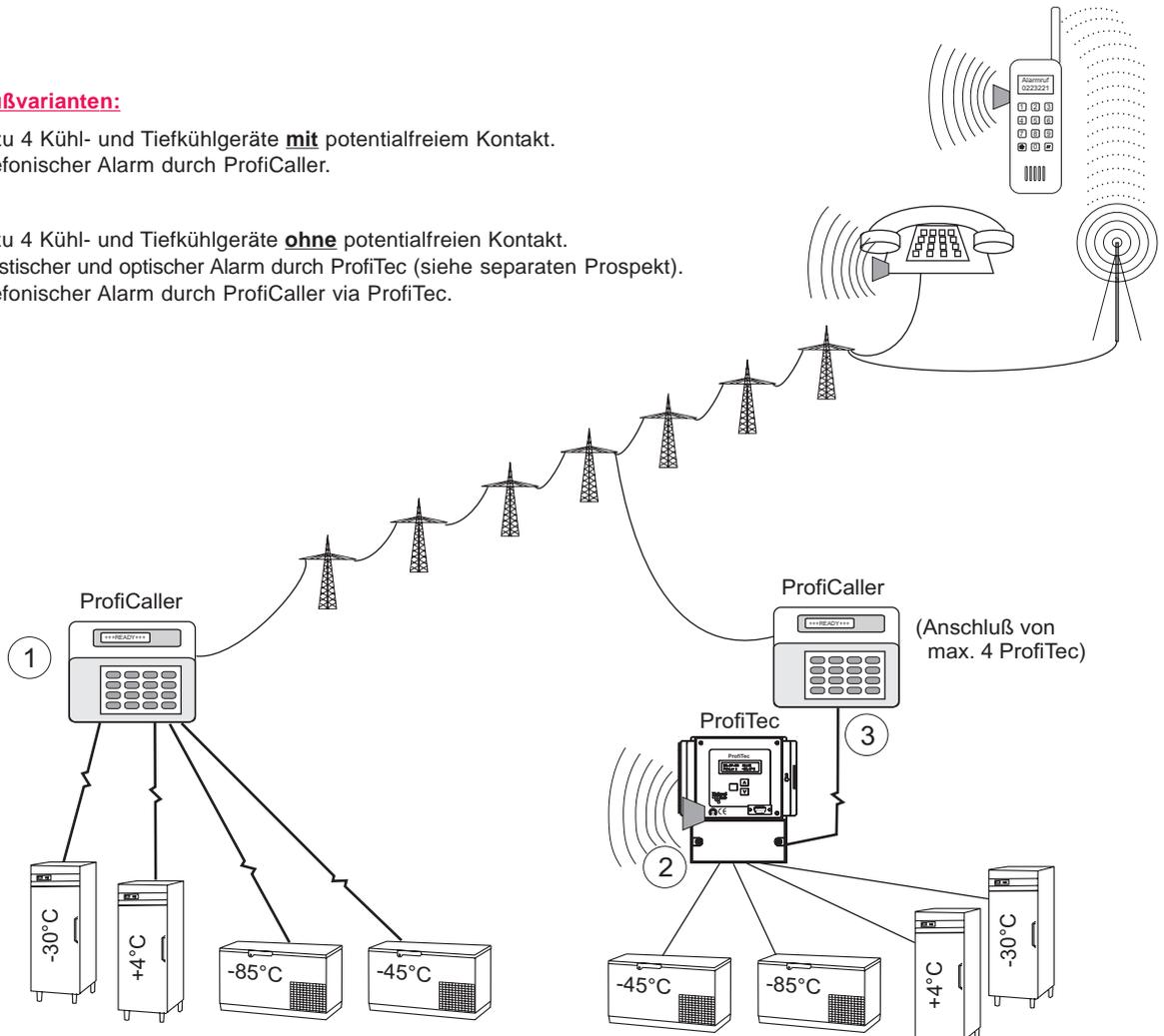

Kühl- und Tiefkühlgeräte **mit** potentialfreiem Kontakt

Kühl- und Tiefkühlgeräte **ohne** potentialfreien Kontakt



<http://www.catalopedia.de>

National Lab GmbH  
Grambeker Weg 157  
D-23879 Mölln  
Tel.: 0 45 42 / 84 91 - 70  
Fax: 0 45 42 / 84 91 - 71  
e-Mail: LabSales@NationalLab.com